

# PARI BOY® *mobile S*

## A moi la liberté!



- Le PARI BOY mobile avec accu – traitement par inhalation à tout moment et à tout endroit.
- Le poids plume parmi les appareils d'inhalation PARI – le petit compresseur puissant garantit un traitement efficace.
- Le compagnon permanent - sur votre lieu de travail, pendant vos loisirs et vos déplacements.


Jugez par vous-même de la qualité de nos produits !  
Pour toutes suggestions et questions :

Centre d'assistance **PARI**: 0049 (0) 8151/2 79-2 79  
[www.pari.de](http://www.pari.de) · E-Mail: [info@pari.de](mailto:info@pari.de)

Spécialistes de l' inhalation efficace



# PARI BOY® *mobile S*

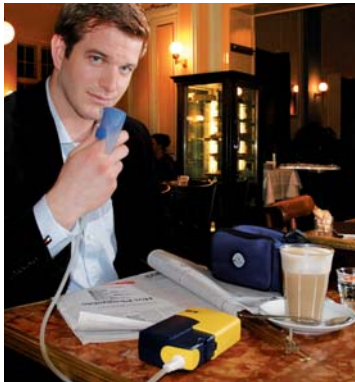

Cet appareil inhalation fonctionnant sur accu, remarquablement petit reste très maniable grâce à ses dimensions (L 8,8 x H 4,5 x P 14,7 cm) et ne pèse que 520 g même lorsque l'accu est monté. Malgré sa petite dimension, le compresseur puissant garantit un traitement par inhalation efficace lorsqu'il est combiné au nébuliseur PARI LC SPRINT. Grâce au sac de transport pratique, qui dispose d'une fenêtre de contrôle du statut de charge, le PARI BOY mobile S peut être transporté partout. Grâce à son fonctionnement silencieux, son utilisation est à peine remarquée par votre entourage.

## Vous pouvez vous fier véritablement à la pièce maîtresse du PARI BOY mobile S - son accu:

- accu lithium-ion moderne, presque sans effet mémoire.
- Lorsque la charge est pleine, vous pouvez inhaler pendant 50 minutes, ce qui représente 8 inhalations environ avec une quantité de remplissage de 2,5 ml.
- La durée de charge complète de l'accu n'est que de 2 heures environ.
- PARI garantit l'accu pendant 1 an.

## Autres caractéristiques du PARI BOY mobile S

- Grâce à l'adaptateur 12 Volt et à l'alimentation universelle (100 à 240 V / 50-60 Hz), vous pouvez utiliser le PARI BOY mobile S dans le monde entier.
- L'appareil mobile convient pour tous, dès l'âge de 4 ans.
- En cas de maladies des voies respiratoires, comme par ex. l'asthme, la bronchite, les maladies pulmonaires obstructives, la mucoviscidose.

### Amélioration du PARI BOY *mobile S* par rapport au modèle précédent PARI UNI light mobil

	MMD [µm]	TOR [mg/min]	% < 5 µm	Poids [g]	Dimensions (L x H x P) [cm]
<b>PARI BOY <i>mobile S</i></b>	3,8*	440	65	520	8,9 x 4,5 x 14,7
<b>PARI UNI light mobil</b>	4,2*	380	60	780	9,3 x 7,4 x 13,1

\* Débit inspiratoire 20l/min, mesure avec Malvern MasterSizer X à 23 °C et 50 % d'humidité relative.  
Fluide nébulisé : 0,9 % NaCl (5 ml).

#### Equipment:

PARI BOY mobile S compresseur avec accu, adaptateur 12 Volt, alimentation de charge (100 à 240 V/50-60 Hz), PARI LC SPRINT nébuliseur (embout bleu), tuyau de raccordement, embout buccal, masque et sac

N° de commande 047G1000

#### Caractéristiques techniques du compresseur:

Pression: 1,0 bar  
Raccordement électrique: 100 – 240 V/50-60Hz  
Garantie: 1 an pour l'accu, 2 ans pour le compresseur  
Accu: accu lithium-ion

Pour toutes informations supplémentaires sur l'utilisation, l'entretien et le nettoyage de nos appareils d'aérosolthérapie adressez-vous:

#### à notre distributeur officiel France

##### PulmoMed SARL

Mr. John Fonseca  
Z.A. du Petit Nanterre  
11 avenue de l'île Saint-Martin  
F-92737 Nanterre Cedex  
France  
Téléphone: +33 (0) 1 56 83 85 00  
Téléfax: +33 (0) 1 56 83 85 09  
e-mail: j.fonseca@pulmomed.fr  
www.pulmomed.fr

#### à notre responsable de zone Benelux

##### Area Sales Manager Benelux:

##### Jan Rycken

Drève des Chasseurs, 153  
1410 Waterloo  
Belgique  
Téléphone: +32 (0) 2 354 51 30  
Téléfax: +32 (0) 2 353 03 82  
Mobile: +32 (0) 476 28 72 33  
e-mail: j\_rycken@pari.de

#### à notre distributeur officiel Suisse

##### Resmed Schweiz AG

Viaduktstrasse 40  
CH-4051 Bâle  
Suisse  
Téléphone: +41 61 564 70 00  
Téléfax: +41 61 564 7010  
E-mail: info@resmed.ch



#### PARI GmbH

Spezialisten für effektive Inhalation  
Moosstrasse 3 · D-82319 Starnberg  
Telefon +49 (0) 8151 279-0  
Fax +49 (0) 8151 279-101



#### PARI sur Internet:

www.pari.de  
E-Mail: info@pari.de

Spécialistes de l'inhalation efficace

